


OCLUSOR DE APÉNDICE AURICULAR IZQUIERDO AMPLATZER™ AMULET™

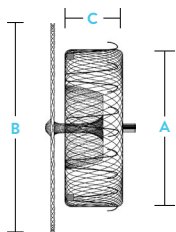

Medición y Selección del Dispositivo

Para que el Lóbulo del dispositivo determine el tamaño apropiado del dispositivo a fin de ocluir el apéndice auricular izquierdo; identifique y mide el apéndice auricular izquierdo en la zona de implantación (definida como aproximadamente de 10 a 12 mm del orificio)

Ancho máximo de la zona de implantación (mm)	Tamaño del dispositivo Amplatzer™ Amulet	Longitud del lóbulo (mm)	Profundidad mínima del apéndice auricular izquierdo (mm)	Diámetro del disco (mm)	Diámetro mínimo de la vaina
11,0-13,0	16	7,5	≥10	22	12 F
13,0-15,0	18	7,5	≥10	24	12 F
15,0-17,0	20	7,5	≥10	26	12 F
17,0-19,0	22	7,5	≥10	28	12 F
19,0-22,0	25	10	≥12	32	12 F
22,0-25,0	28	10	≥12	35	14 F
25,0-28,0	31	10	≥12	38	14 F
28,0-31,0	34	10	≥12	41	14 F

La información incluida en el presente documento es PARA DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA fuera de EE. UU. Verifique la situación regulatoria del dispositivo en áreas donde la marca CE no es la regulación en vigor.

Información de pedidos

Contenido: 1 ocluser, 145 cm de cable de liberación, tornillo de plástico para el cable de liberación, válvula hemostática, cargador, cable cargador y tornillo de plástico para cargar el cable, adaptador de vaina (dispositivos de 16 a 25 mm)

Código de Producto n.º	Diámetro del lóbulo (mm) (A)	Diámetro del disco (mm) (B)	Longitud del lóbulo (mm) (C)	Tamaño de vaina recomendado
9-ACP2-007-016	16	22	7,5	12 F o 14 F con adaptador
9-ACP2-007-018	18	24	7,5	12 F o 14 F con adaptador
9-ACP2-007-020	20	26	7,5	12 F o 14 F con adaptador
9-ACP2-007-022	22	28	7,5	12 F o 14 F con adaptador
9-ACP2-010-025	25	32	10	12 F o 14 F con adaptador
9-ACP2-010-028	28	35	10	14 F
9-ACP2-010-031	31	38	10	14 F
9-ACP2-010-034	34	41	10	14 F

Accesorios recomendados

Accesorio	Página
Vaina de liberación Amplatzer™ Amulet™	43
Guía Amplatzer™ (9-GW-002)	48